

NUOVO

Adhese[®] Universal

L'adesivo universale


Basta
un click ...
Fino a 190 applicazioni.



Adhese® Universal

ADESIONE UNIVERSALE, CONFEZIONAMENTO ALL'AVANGUARDIA

Adhese Universal è un adesivo universale monocomponente, fotopolimerizzabile, indicato nelle procedure restaurative dirette e indirette. Il prodotto è compatibile con tutte le tecniche di mordenzatura: self-etch, mordenzatura selettiva dello smalto, total-etch. L'innovativo confezionamento in formato penna VivaPen® consente l'applicazione pratica e veloce dell'adesivo direttamente in bocca al paziente. Lo spreco di materiale è minimo, per un rapporto di costo-efficacia massimo.

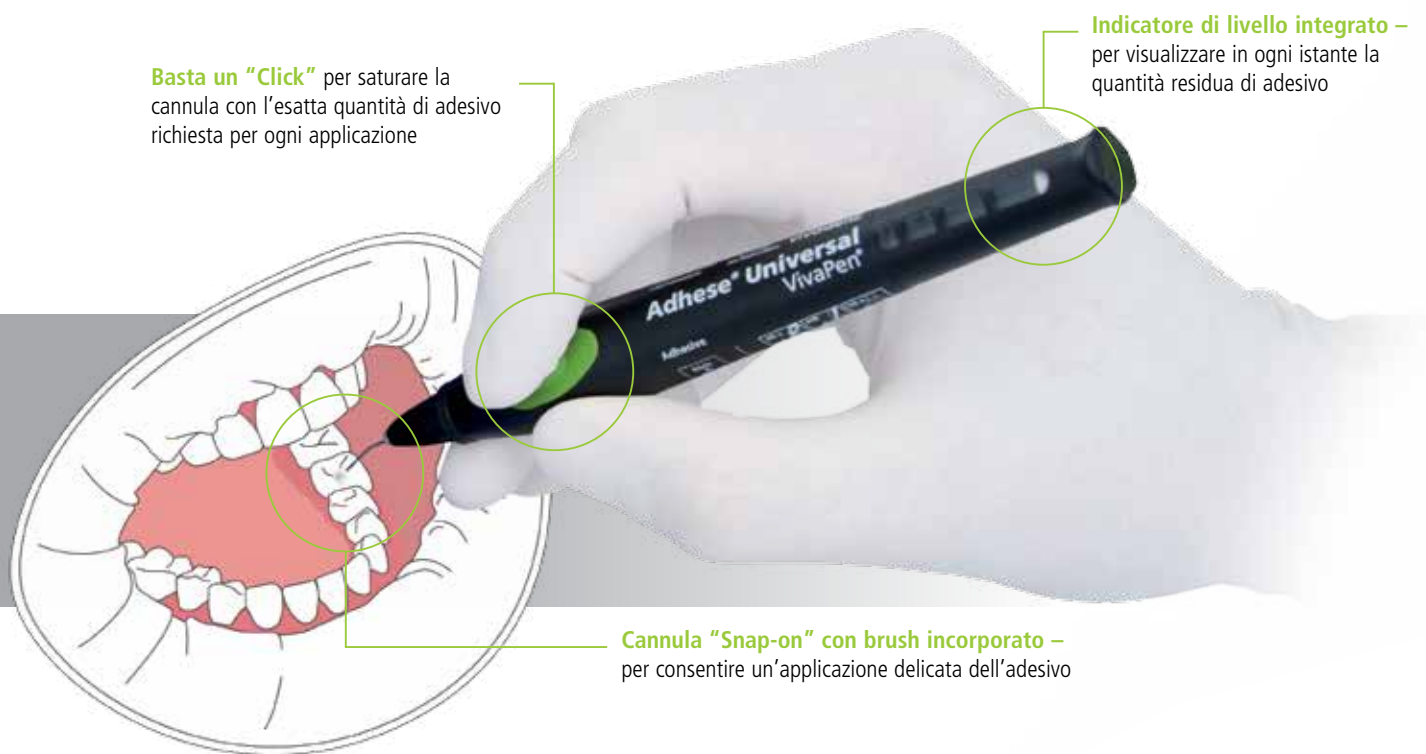

Basta un "Click" per saturare la cannula con l'esatta quantità di adesivo richiesta per ogni applicazione

Indicatore di livello integrato – per visualizzare in ogni istante la quantità residua di adesivo

Cannula "Snap-on" con brush incorporato – per consentire un'applicazione delicata dell'adesivo

Il design ergonomico di VivaPen unitamente alla sua cannula angolata e con brush incorporato consentono al clinico di impugnare la penna in modo naturale, per un'applicazione intraorale diretta di massimo comfort e precisione.

La straordinaria praticità di VivaPen è stata insignita nel 2013 del premio iF Packaging Design Award.



EROGAZIONE EFFICACE

Dosaggio preciso con il sistema di erogazione "Click & Bond" di VivaPen

Con VivaPen, basta un semplice "Click" per erogare esattamente la quantità di adesivo richiesta. Prima dell'applicazione non occorre più predosare l'adesivo nell'apposita vaschetta, riducendo così notevolmente qualsiasi spreco di materiale.




Con VivaPen la resa è quasi triplicata

Un Istituto di valutazione indipendente ha raffrontato il formato VivaPen con le tradizionali confezioni in flacone, conducendo un'analisi gravimetrica dopo una tipica giornata d'utilizzo clinico. Sono stati considerati i seguenti elementi: efficienza, spreco di materiale, economicità.

I 2 millilitri di adesivo contenuti in VivaPen corrispondono a circa 190 applicazioni per dente singolo. Rispetto ai tradizionali confezionamenti in flacone, il numero di applicazioni per millimetro è circa 3 volte superiore.

Numero di applicazioni per ml per dente singolo

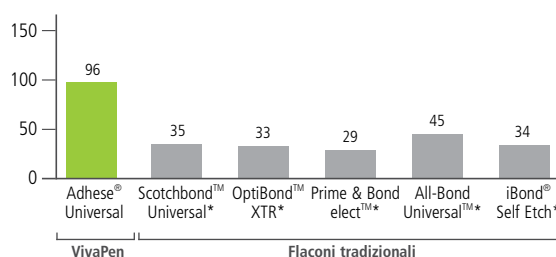

* Non sono marchi registrati Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: Berndt & Partner, VivaPen Studio di Benchmarking, Agosto 2013

Applicazione rapida e conveniente in soli 35 secondi



Applicare uno strato di adesivo e frizionarlo sulla superficie per 20 secondi.
Dr S. Huth, R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013



Distribuire l'adesivo mediante soffio d'aria fino ad ottenere un film lucido e immobile.



Fotopolimerizzare per 10 secondi.

RISULTATI PREDICIBILI

Valori di resistenza al taglio costantemente elevati


Adhese Universal è tollerante a qualsiasi tecnica ed errore operativo. Esso forma un film stabile ed omogeneo insensibile alle varie tecniche adesive. Inoltre, con un unico strato adesivo, Adhese Universal garantisce livelli di adesione costantemente elevati su smalto e dentina, a prescindere dal protocollo di mordenzatura impiegato.

Sensibilità postoperatoria pressoché nulla

Il solvente idrofilo e privo di acetone contenuto in Adhese Universal garantisce l'ottimo umettamento di smalto e dentina. Ne consegue una migliore penetrazione nei tubuli dentinali e il loro sigillo, riducendo il rischio di microleakage e di sensibilità postoperatoria.


Bonding diretto – Tecnica Total-etch

Valore di adesione in combinazione con Tetric EvoCeram® Bulk Fill

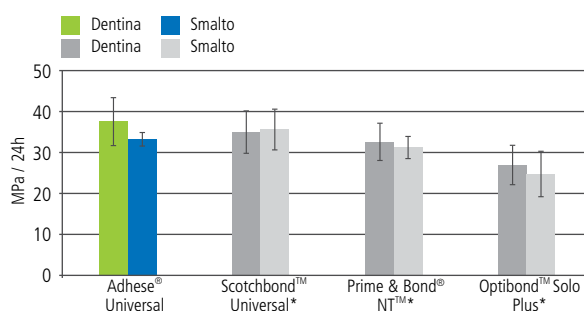


Bonding diretto – Tecnica Self-etch

Valore di resistenza al taglio in combinazione con Tetric EvoCeram® Bulk Fill

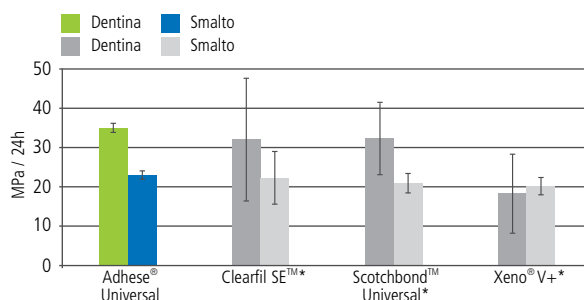

Bonding indiretto – Tecnica Total-etch

Valore di resistenza al taglio in combinazione con Variolink® II dopo indurimento duale

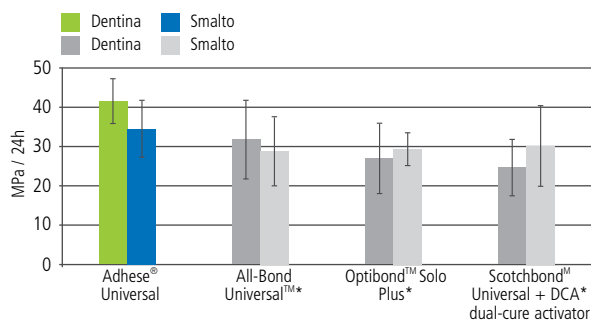

* Non sono marchi registrati Ivoclar Vivadent AG.

Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013

Informazioni per gli ordini

665156WW	Refill VivaPen 1 x 2 ml
663723WW	Promo VivaPen 1 x 2 ml / 100
663717WW	Starter Kit VivaPen 1 x 0.5 ml
627178	Refill VivaPen cannule "snap-on" (100 pz.)
627492	Refill VivaPen guaine protettive (300 pz.)

663720WW	Refill Flacone 1 x 5 g
663721WW	Refill Flacone 2 x 5 g
664698	Refill Vivadent applicatori, verde (50 pz.)



Adhese Universal è disponibile in formato VivaPen e nelle tradizionali confezioni in flacone.

Adhese Universal può essere conservato normalmente a temperatura ambiente.

28°C
82°F
Temperatura di conservazione

APPLICAZIONE UNIVERSALE

Indicato nelle procedure adesive dirette e indirette

- Ridotto spessore dello strato – per garantire la massima precisione dei restauri indiretti
- Stabilisce un ottimo legame con diversi materiali da restauro
- Nessun attivatore per l'indurimento duale nella cementazione di restauri indiretti

Compatibile con tutte le tecniche di mordenzatura

Adhese Universal riunisce in sé proprietà idrofile e idrofobiche in un solo prodotto. Esso è pertanto tollerante all'umidità e penetra bene nei tubuli dentinali pervi. Le sue proprietà leggermente acide rendono Adhese Universal il prodotto indicato con qualsiasi protocollo di mordenzatura, garantendo un legame affidabile tra il materiale da restauro e la struttura dentale.



Frizionare uno strato di Adhese Universal sulla superficie del dente per almeno 20 secondi.



Applicare l'acido ortofosforico esclusivamente su smalto e lasciare agire per 15–30 secondi. Quindi applicare Adhese Universal su smalto e dentina e frizionare per almeno 20 secondi.



Condizionare sia smalto (15–30 secondi) sia dentina (10–15 secondi) con acido ortofosforico. Successivamente applicare Adhese Universal su smalto e dentina e frizionare per 20 secondi.

Dr A. Peschke, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013

Tecnica Self-etch

- si risparmia tempo
- riduce il rischio di sensibilità postoperatoria

Mordenzatura selettiva dello smalto

- accresce l'adesione allo smalto
- migliora il sigillo marginale

Tecnica Total-etch (etch & rinse)

- massimizza l'adesione su smalto e dentina
- migliora il sigillo marginale



Restaurativa diretta

Adhese® Universal è un prodotto della categoria “Restaurativa diretta”. I prodotti di questa categoria coprono l'intero iter della terapia restaurativa diretta – dalla preparazione alla cura nel tempo, del restauro e sono tutti perfettamente calibrati tra loro. Essi sono stati formulati per garantire al clinico una lavorazione e un utilizzo di pieno successo.



TRA I PRODOTTI DELLA CATEGORIA RESTAURATIVA DIRETTA:

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Il composito bulk modellabile



Restauri posteriori, oggi ancora più efficienti

- Restaurare con masse incrementali fino a 4 mm di spessore, grazie al fotoiniziatore brevettato Ivocerin®
- Modellare con facilità, grazie alla consistenza plastica del materiale
- Fotopolimerizzare... e il restauro estetico è pronto!

Fluor Protector S

Lacca protettiva al fluoro



Lacca protettiva omogenea nel tubo erogatore

- Immediata fluorurazione dello smalto
- Deposito di fluoro dall'azione prolungata
- Gusto gradevole

Se desiderate maggiori dettagli sui prodotti della categoria “Restaurativa diretta” visitate il sito www.ivoclarvivadent.com.

Ivoclar Vivadent AG
Benderstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent srl
Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 611 35 55
Fax 051 611 35 65
clinical@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.it

it/2014-02-28

ivoclar
vivadent
passion vision innovation