



## Protesi rimovibile

SR Phonares® II è un prodotto della categoria „Protesi rimovibile“. I prodotti di questa categoria coprono l'intero iter di realizzazione di un restauro protesico rimovibile, dalla pianificazione e dall'impronta, fino alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti di questa categoria sono calibrati in modo ottimale fra di loro e consentono una lavorazione ed un'applicazione di successo.



### QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

#### Stratos®

Gli affermati articolatori



Convincente qualità e precisione

Simulazione della funzione per restauri di elevata qualità nel campo della protesi rimovibile e della protesi fissa.

#### Materiale per protesi

Utilizzo semplice e sicuro



Impressionante versatilità e precisione

- Predosato o convenzionale per il massimo confort di utilizzo
- Utilizzabile per la tecnica di iniezione, zeppatura o collaggio
- Soddisfa le più disparate esigenze di resistenza

Desiderate saperne di più sui prodotti della categoria "Protesi rimovibile"? Per qualsiasi informazione, visitate il sito [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it).

**Ivoclar Vivadent AG**  
 Bendererstr. 2  
 FL-9494 Schaan  
 Liechtenstein  
 Tel. +423 / 235 35 35  
 Fax +423 / 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**Ivoclar Vivadent s.r.l.**  
 Via Isonzo 67/69  
 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
 Italia  
 Tel.: +39 051 611 35 55  
 Fax: +39 051 611 35 65  
[www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)

Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti.  
 © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
 it/2013-03-21

**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
 passion vision innovation

# SR Phonares® II

L'espressione estetica nei denti artificiali

Forme naturali per  
elevate esigenze



  
**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation

NATURALMENTE –  
FEDELE ALLA NATURA

# SR Phonares® II

## *Estetica espressiva*

### Massime esigenze

Le esigenze del portatore di protesi oggi sono notevolmente modificate. Oggigiorno si realizzano spesso soluzioni supportate da impianti. In caso di restauro protesico supportato da impianti però la forza masticatoria aumenta notevolmente. La resistenza del materiale e pertanto la sua tolleranza, assumono quindi un ruolo determinante in questo campo di indicazioni.

### Lo sviluppo del materiale

Il materiale nanoibrido di SR Phonares II possiede un'elevata tenacia. In tal modo ne deriva un'ottimale efficienza, soprattutto grazie ad una buona resistenza all'abrasione nonché ad un comportamento tollerante e resistente.


### Estetica naturale

Gli indici di rifrazione dei diversi riempitivi sono calibrati fra di loro, supportando in tal modo il naturale effetto cromatico del materiale e facilitando la scelta cromatica del restauro.

### Ottimale scelta cromatica

La determinazione del colore ottimale avviene con la scala colori SR Phonares II, che nella sua stratificazione e materiale corrisponde ai denti artificiali. In tal modo si possono pressoché escludere scostamenti cromatici nella scelta del colore. In alternativa, per una scelta generale, è indicata anche la scala colori A–D che include i 4 colori Bleach.

I denti SR Phonares II sono disponibili in 16 colori A–D e 4 colori Bleach.

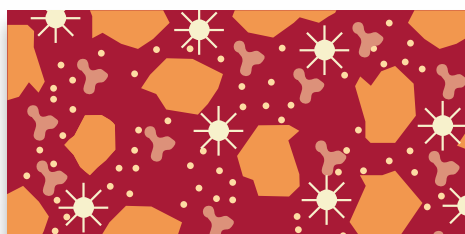

- Matrice UDMA
- Condensato silanizzato SiO<sub>2</sub>
- Polimero UDMA riempito inorganicamente
- Nanoparticelle SiO<sub>2</sub> silanizzate
- Gruppi PMMA





ARTE NATURALE  
NEGLI ANTERIORI

## SR Phonares® II

I capolavori di forma di SR Phonares II sono espressivi come i denti naturali ed aprono ottime possibilità nella realizzazione di restauri ispirati alla natura.

Assapora il massimo della pura bellezza e dell'aspetto vitale in zona anteriore.

### L'estetica che colpisce

- Tessitura superficiale unica nel suo genere
- Rapporti armonici di traslucenza, opalescenza e fluorescenza




### Impressionante funzione

- Spazi prossimali appositamente ridotti per un'"estetica bianca" naturale
- Montaggio dei denti anteriori particolarmente semplice, grazie alla modellazione prossimale "set & fit"






### Stratificazione individuale dei denti

Specifiche stratificazioni per ogni forma sottolineano le caratteristiche di individualità. Grazie alla tecnica di iniezione di nuova concezione, i singoli strati si integrano già nel corso della produzione. Pertanto si esalta in modo ottimale l'effetto naturale.

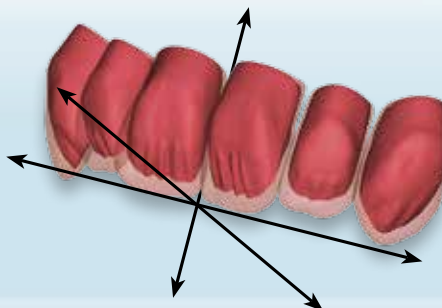

## IL CONCETTO DELLE FORME DENTI INDIVIDUALMENTE CREATE PER ETÀ E TIPOLOGIA DI PAZIENTE

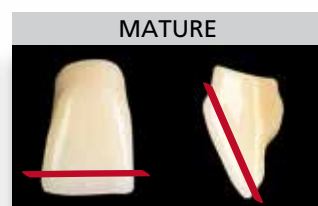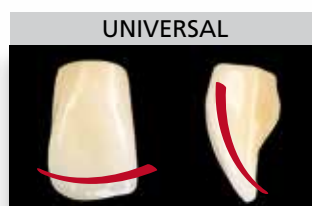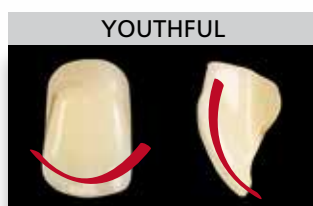

- Margine incisale naturale
- Convessità vestibolare accentuata

- Leggere abrasioni del margine incisale
- Convessità vestibolare meno accentuata

- Abrasione accentuata del margine incisale
- Minima convessità vestibolare

### Facilmente combinabile

SR Nexco® – il composito da laboratorio in pasta, è esattamente calibrato cromaticamente con SR Phonares II. Questo facilita notevolmente la realizzazione di protesi combinate.

IvoBase® – il preciso materiale per protesi predosato. Con questo materiale il restauro protesico rimovibile ottiene un'elevata qualità.

### Confezionamento

SR Phonares® II  
18 forme anteriori superiori  
6 forme anteriori inferiori



UNIVERSALITÀ ED ARTE  
IN ZONA LATERO-POSTERIORE

# SR Phonares® II Typ

SR Phonares II Typ è il dente dall'occlusione più tradizionale per l'impiego in protesi parziale e totale e pertanto è versatile nell'impiego.

La semplice intercuspidação tra i denti antagonisti, lo rende particolarmente rapido nel montaggio.

Occlusione classica

## Intercuspidação



Montaggio "dente a due denti"

## Confezionamento

SR Phonares® II Typ

3 forme posteriori superiori

3 forme posteriori inferiori



## DENTI POSTERIORI TYP E LINGUAL

### Ridotto design della base

La conformazione particolarmente ridotta della base del dente fa risparmiare tempo nel fresaggio del tallone del dente.

### Ampia conformazione mesio-distale

Queste dimensioni sono ideali per la sovracopertura dell'abutment implantare ed altre meso-strutture.

# OCCLUSIONE ED ARTE NELLE RIABILITAZIONI IMPLANTARI IN ZONA LATERO-POSTERIORE

## SR Phonares® II *Lingual*



Il concetto di occlusione lingualizzata di SR Phonares II Lingual è indicato particolarmente per restauri rimovibili supportati da impianti.

L'ideale distribuzione delle forze in combinazione con un materiale particolarmente resistente all'abrasione crea la base di longevità del restauro protesico.



Occlusione lingualizzata

### Intercuspidazione



Montaggio "dente a dente"



Montaggio "dente a due denti"

### Confezionamento

SR Phonares® II *Lingual*  
3 forme posteriori superiori  
3 forme posteriori inferiori

