

Programat[®]

UNA STORIA DI SUCCESSO

GARANZIA
3 ANNI



Programat[®]
P500

PER COLORO CHE AMANO LA PARTICOLARITÀ

ivoclar[®]
vivadent[®]

Programat® P500

PER COLORO...



Particolare


Il nuovo Programat P500 unisce alta tecnologia e design in un forno molto semplice nell'impiego e particolare. La combinazione della tastiera e dell'ampio e visibile display grafico con funzione "touch" è soltanto uno dei vantaggi determinanti che Le renderà piacevole l'impiego del P500.

Innovativo

Per quanto riguarda la tecnologia di cottura, il nome Programat è come sempre sinonimo di innovazione, qualità ed una pluriennale storia di successo. La nuova tecnologia della resistenza QTK (tubo in quarzo Kanthal) assicura una radiazione termica ancora più omogenea. Ne derivano risultati di cottura ottimali, di cui ci si può fidare.


Economico

Naturalmente La aspetta una molteplicità di ulteriori vantaggi, come p.es. la calibratura automatica della temperatura attraverso due punti di riferimento: risparmia tempo e convince per l'estrema precisione, poiché decorre completamente automaticamente. Inoltre il P500 dispone di un'interfaccia USB integrata, che Le consente un facile accesso a computer, stampanti e ad ulteriori mondi.

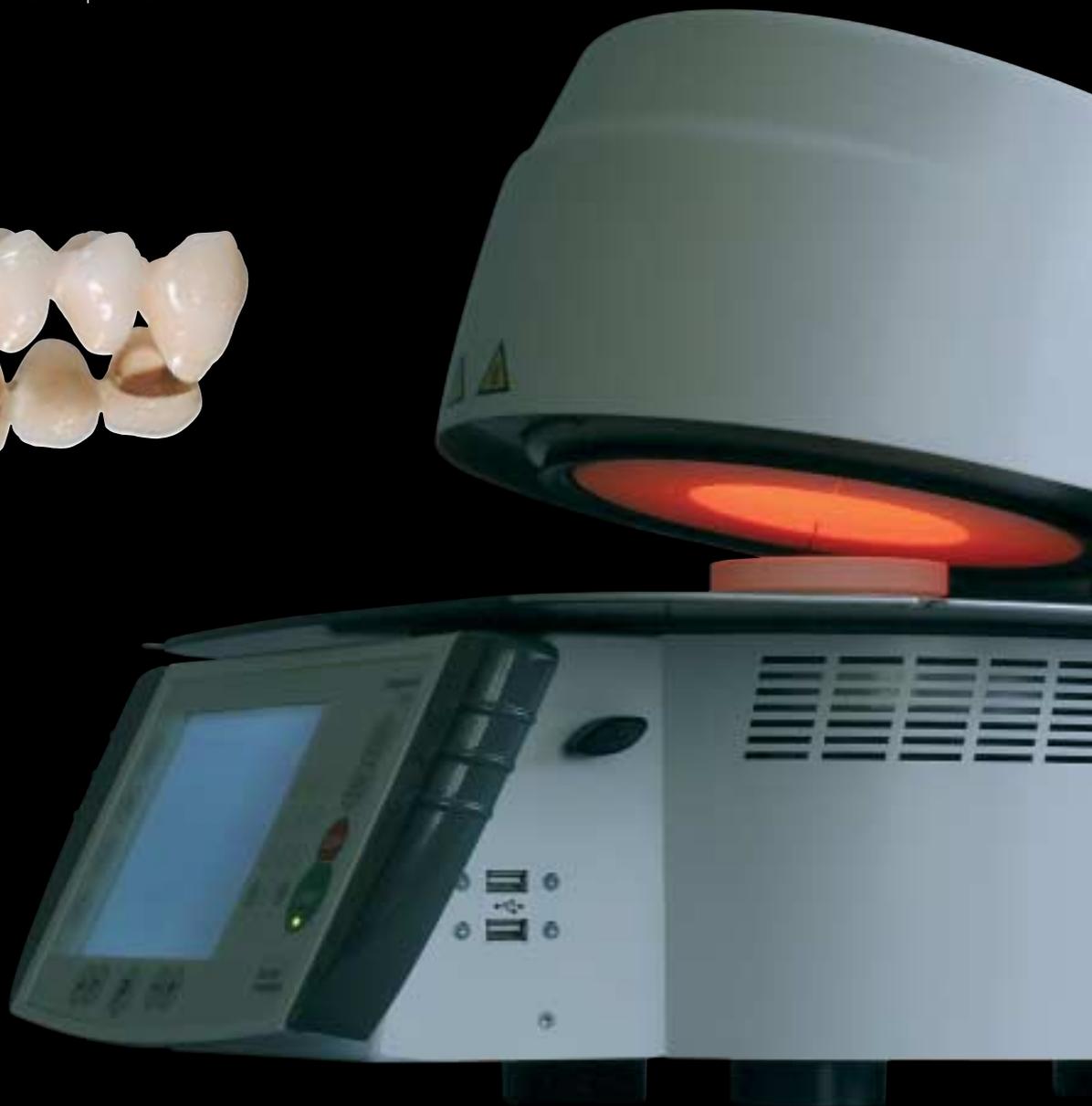

... CHE AMANO LA PARTICOLARITÀ!

I VANTAGGI DETERMINANTI

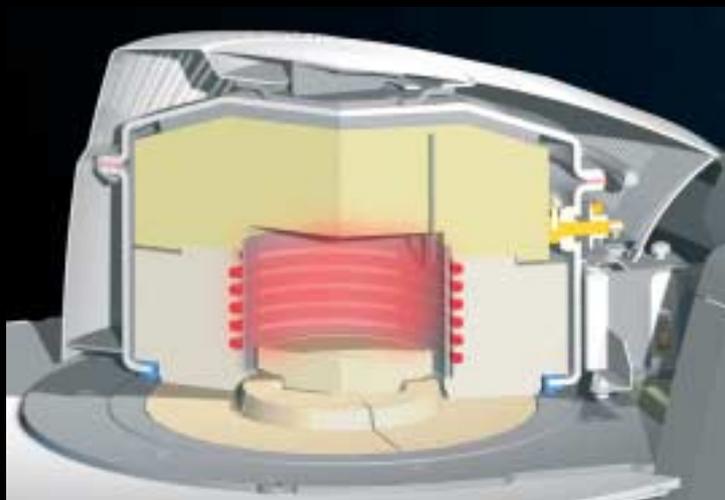


Ottimali risultati di cottura

Radiazione termica omogenea, grazie alla nuova tecnologia della resistenza QTK (tubo in quarzo Kanthal).



Impiego estremamente semplice


Ampio display grafico orientabile con funzione "touch" ed affermata tastiera, consentono una immissione dati confortevole ed una rapida lettura dei parametri rilevanti.

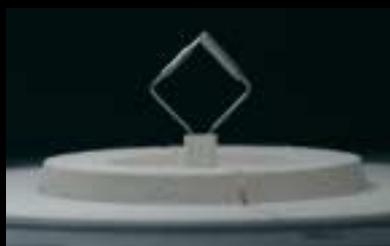

Calibratura automatica della temperatura (ATK 2)

La novità consente una calibratura della temperatura agevole, semplice ed estremamente precisa – sia nel campo di temperatura a bassa fusione sia nel campo classico (calibratura in duplice campo).

LE PARTICOLARITÀ

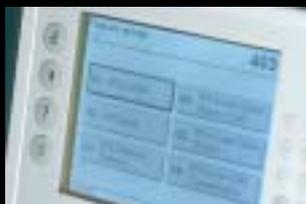

300 programmi di cottura

- programmi standard pre-impostati (IPS e.max®, IPS InLine®, IPS d.SIGN® ed IPS Empress®)
- programmi individuali
- diversi pratici programmi di configurazione ed ausiliari




PrograSoft

Il programma di amministrazione dei dati di cottura per uno standard operativo di qualità e la documentazione dei dati



Lavorazione economica

- lavorazione efficiente con il sistema Turbo Opening (5 sec.)

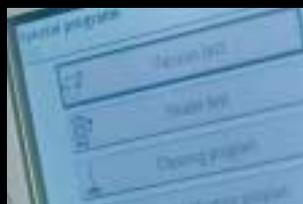


Elevata sicurezza d'impiego

- utili programmi di diagnosi (p.es. test del vuoto, della resistenza e del display)
- sistema di segnalazione errori integrato (campo di dialogo con prestazioni di aiuto)



Collegamenti USB

Questa opzione consente l'allacciamento di apparecchi supplementari (stampante, PC, USB Memory Stick), aprendo quindi il mondo dei PC

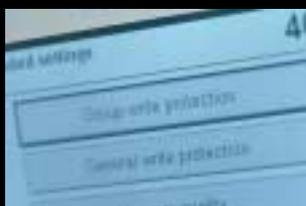

Pratica protezione da scrittura

Sono possibili tre diverse opzioni (protezione generale mediante codice, gruppo di programma, programma)



Preasciugatura individuale

- nuovo programma di preasciugatura a cappa aperta, come ulteriore funzione di preasciugatura, prima dell'attivazione del processo di chiusura (S)
- temperatura e durata a scelta individuale

ULTERIORI VANTAGGI

- design compatto ed ergonomico
- ampia piastra d'appoggio dei lavori
- facile manutenzione, grazie alla cappa estraibile
- affermata meccanica di apertura (a conchiglia)
- "Power Fail Save" e sistema di controllo automatico del vuoto (EVCS)
- 5 tonalità di segnale a scelta per ogni melodia incl. volume
- sei diverse lingue a scelta (tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo e portoghese)
- risparmio di tempo, grazie alla resistenza dalle elevate prestazioni (fino a 140°C t/min.)
- impiego economico, grazie alla elevata durata di vita della resistenza
- rapido riutilizzo del forno, grazie al veloce raffreddamento della cappa

... CHE AMANO LA PARTICOLARITÀ!

Calibrato

Il Programat P500 contiene una molteplicità di programmi di cottura standard, calibrati sulle masse ceramiche Ivoclar Vivadent. In tal modo si possono raggiungere ottimali risultati di cottura – ed il tutto da un'unica azienda!



IPS e.max



IPS InLine



IPS d.SIGN



IPS Empress



Programat® P500

DATI TECNICI

Allacciamento elettrico	110-120 V 50-60Hz 200-240 V 50-60Hz oscillazioni di tensione ammesse $\pm 10\%$
Assorbimento di corrente max.	12 A a 110-120 V 8.5 A a 200-240 V
Dati per le pompe per vuoto	Assorbimento di corrente max: 2.1 A Vuoto finale: < 50 mbar Impiegare soltanto pompe testate
Display	Grafico con display LCD con touchscreen e illuminazione di sfondo
Dimensioni fusibili elettrici	110-120 V: diametro 6.3 x 32 mm 200-240 V: diametro 5 x 20 mm
Dimensioni del forno chiuso	Profondità: 468 mm Larghezza: 303 mm / 382 mm (con piastra d'appoggio) Altezza: 320 mm
Dimensioni camera di cottura	Diametro: 80 mm Altezza: 48 mm
Temperatura di cottura max.	1200°C
Pesi	Parte inferiore: 12.6 kg Cappa: 4.5 kg
Indicazioni di sicurezza	Il forno per cottura è stato costruito secondo le seguenti norme: - IEC 1010-1, rispett. EN 61010 - UL e cUL standard
Radioprotezione/ compatibilità elettromagnetica	Testata EMV



PRESENTAZIONE

- 1 Programat P500
- 1 piastra d'appoggio per oggetti
- 1 cavo di allacciamento
- 1 portaoggetti Programat
- 1 set controllo temperatura 2 (campione prova)
- 1 set fusibili di ricambio
- 1 cavo download USB
- 1 USB Stick Programat

Accessori consigliati:

- (Non contenuti nella presentazione di cui sopra)
- pompa per vuoto VP3 easy o VP3
 - pinza per Programat
 - set ATK2 – set controllo temperatura automatico 2

Colore:

Bianco (RAL 9016)



VP3 easy



VP3

Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti.
Stampato in Austria
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
xxxxxx/10051/IVVA

Fabbricante
Ivoclar Vivadent AG Technical
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent s.r.l. Technical
Via dell'Industria 16
I-39025 Naturno (BZ)
Italia
Tel. 0473 / 67 01 11
Fax 0473 / 66 77 80
www.ivoclarvivadent.it
e-mail info@ivoclarvivadent.it

ivoclar
vivadent®