

Click & Bond™
con

Viva Pen®

Quale tecnica adesiva preferisce?

Excite®

Adesivo
Total-Etch

AdheSE®
One

Adesivo
Self-Etch

ExcITE®


Adesivo Total-Etch



ExcITE è un adesivo monocomponente clinicamente affermato da anni, che viene impiegato in combinazione con la tecnica Total-Etch. ExcITE è indicato sia per restauri diretti sia per la cementazione adesiva fotoindurente di restauri indiretti.

Convincente adesione su smalto e dentina

I test clinici dimostrano elevati valori di adesione di ExcITE su smalto e dentina.

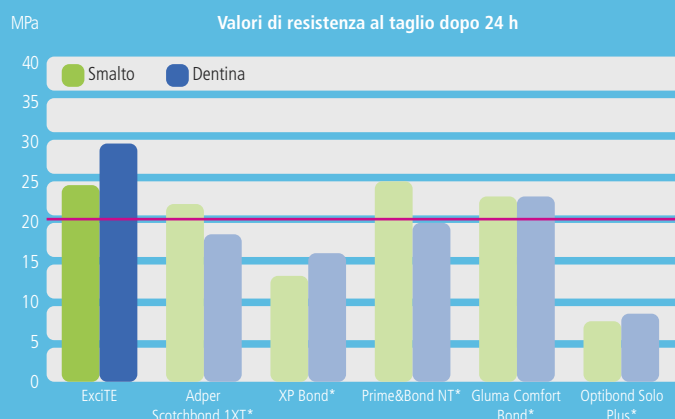


*) non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG
Fonte: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, gennaio 2008

Minimo spessore a garanzia di un perfetto adattamento

ExcITE presenta uno spessore del film minimo, per cui dopo il fotoindurimento vi è sufficiente spazio per il composito da fissaggio impiegato per la cementazione adesiva di restauri indiretti.

Ridotta sensibilità postoperatoria

Diversi studi hanno confermato che ExcITE assicura una sigillatura effettiva della superficie dentinale, riducendo in tal modo un'eventuale sensibilità postoperatoria. Poiché ExcITE contiene nanoriempitivi, la cavità viene umettata omogeneamente con l'applicazione di un solo strato. Inoltre durante l'applicazione è visibile uno strato lucido sulla superficie del dente, che consente un controllo visivo.

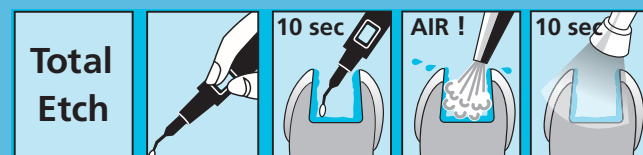

Click & Bond™ VivaPen®

L'originale confezionamento a forma di penna VivaPen permette un'applicazione semplice e senza spreco di materiale degli adesivi dentali Ivoclar Vivadent direttamente in bocca al paziente. VivaPen è disponibile sia per l'adesivo automordenzante AdheSE One sia per l'affermato ExcITE da usarsi in abbinamento alla tecnica Total-Etch. Con l'innovativo confezionamento VivaPen applicherà il Suo adesivo in modo rapido, semplice ed economico! Semplicemente Click & Bond!

Click & Bond con VivaPen

Cannula VivaPen con microbrush incorporato, angolata ed intercambiabile per un **semplice frizionamento**

Adattatore girevole per un **posizionamento individuale** della cannula VivaPen Brush

Attivazione mediante un **semplice click**



Sufficiente per ca. 100 applicazioni


Con VivaPen applicazione diretta risparmiando tempo



L'originale confezionamento a forma di penna VivaPen permette un'applicazione diretta senza perdite di tempo e senza spreco di materiale. Qualora sia necessario altro adesivo, è sufficiente un ulteriore click.

Risparmio di materiale grazie ad un esatto dosaggio

Grazie a VivaPen non si spreca inutilmente adesivo, poiché si preleva soltanto la quantità di adesivo realmente necessaria. Inoltre la cannula VivaPen Brush è stata appositamente sviluppata per questo confezionamento, riducendo allo stesso modo il volume inutilizzato, per avere minor spreco di materiale.

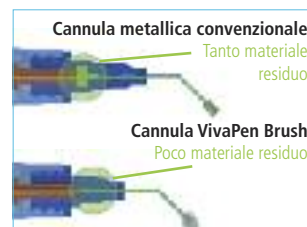

Inserire la cannula VivaPen Brush



Orientare la cannula nella posizione desiderata, girando l'adattatore



Attivare VivaPen con un click fino all'umettamento della cannula VivaPen Brush



AdheSE[®] One


Adesivo Self-Etch



AdheSE One è un adesivo All-In-One, automordenzante e fotoindurente per restauri diretti (compositi, compomeri).

Adesione convincente su smalto e dentina

È sufficiente l'applicazione di uno strato di AdheSE One per raggiungere valori di adesione elevati su smalto e dentina.

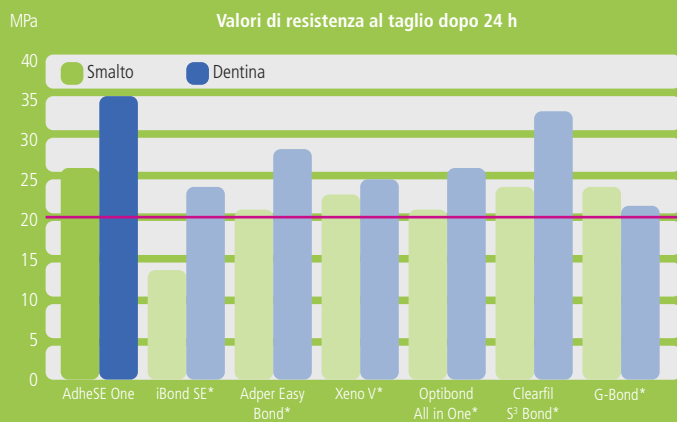

*) non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG
Fonte: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaen, gennaio 2008

Conservazione a temperatura ambiente senza perdita qualitativa

In AdheSE One, come già avviene per l'adesivo AdheSE, clinicamente affermato, brevettati monomeri stabili all'idrolisi, assicurano una qualità costante dalla prima all'ultima erogazione non rendendo necessaria la conservazione in frigorifero.

Chimica priva di acetone

La chimica priva di acetone previene una rapida evaporazione e la separazione di fase. L'utilizzo di acqua quale solvente assicura la stabilità qualitativa di AdheSE One.

Solventi impiegati in adesivi monocomponenti automordenzanti

AdheSE One	Acqua
iBond SE*	Acetone, acqua
G-Bond*	Acetone, acqua
Optibond All-In-One*	Acetone, etanolo, acqua

*) non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG
Fonte: indicazioni del produttore



CONFEZIONAMENTI

ExcITE

Adesivo Total-Etch

Intro Pack

2 ml ExcITE VivaPen
2 g Total Etch
80 cannule VivaPen Brush
10 cannule d'applicazione Total Etch

Refill/1

2 ml ExcITE VivaPen
80 cannule VivaPen Brush

Refill/3

3 x2 ml ExcITE VivaPen
240 cannule VivaPen Brush



ExcITE è disponibile inoltre nel flacone convenzionale e nella cartuccia monodose Soft-Touch.

Accessori VivaPen

Refill

100 cannule VivaPen Brush

Refill

500 guaine protettive

AdheSE One

Adesivo Self-Etch

Refill/1

2 ml AdheSE One VivaPen
80 cannule VivaPen Brush

Refill/3

3 x2 ml AdheSE One VivaPen
240 cannule VivaPen Brush



Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia degli attributi e non sono vincolanti.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
Stampato in Liechtenstein

00000/0308/IBVD

Distribuito da:
Ivoclar Vivadent
Divisione **Clinical**
Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 / 591384
Fax +39 051 / 593317
e-mail: clinical@ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent s.r.l. & C. sas
Via Gustav Flora, 32
39025 Naturno (BZ)
Tel. +39 0473 / 670111
Fax +39 0473 / 667780
www.ivoclarvivadent.it


ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation