


# Tetric EvoFlow<sup>®</sup>

Il composito flowable



**Scorre** quando richiesto.  
**Stabile** quando occorre.

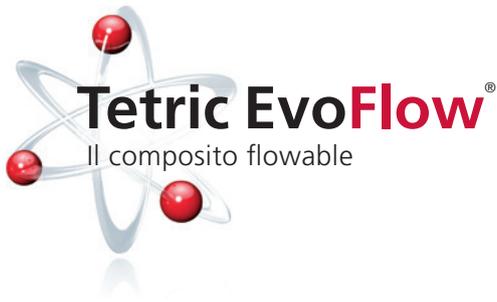


## Nuovo look, affidabilità comprovata

L'odontoiatria restaurativa moderna sarebbe impensabile oggi senza i compositi flowable. Questi prodotti vengono in aiuto ovunque si desideri ottima affinità di superficie, compito nel quale Tetric EvoFlow® eccelle. Tetric EvoFlow, il composito flowable più venduto in Europa, amato per la sua consistenza, è ora disponibile nella nuova confezione ergonomica mantenendo l'elevata qualità di sempre, come conferma il Dr Eduardo Mahn, Direttore di Ricerca Clinica presso la Universidad de los Andes, Santiago, Cile:



Dr Eduardo Mahn


” Nelle sfide cliniche più impegnative, so di poter contare sull'ottima proprietà di scorrimento e la mirata stabilità di Tetric EvoFlow. Il composito è pratico da applicare, consentendomi così risultati di elevata qualità estetica. ”

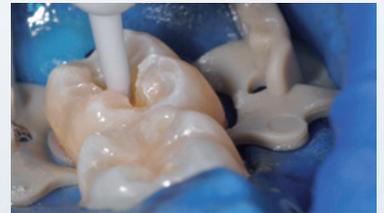

Immagini: Dr Eduardo Mahn, Santiago, Cile

Tetric EvoFlow è un prodotto della linea Tetric. Sia che si necessiti di un composito modellabile o di un composito flowable, i prodotti di questa linea offrono la soluzione mirata per ogni indicazione.

MODELLABILE		FLOWABLE
<b>Tecnica incrementale</b>	<b>Tecnica Bulk</b>	<b>Tecnica incrementale</b>
<b>Tetric EvoCeram®</b>	<b>Tetric EvoCeram® Bulk Fill</b>	<b>Tetric EvoFlow®</b>
Il composito	Il composito in bulk	Il composito flowable
Il composito utilizzato con successo in milioni di casi clinici, in 4 masse Dentina, 14 masse Smalto e 4 colori Bleach	L'innovativo composito estetico per restauri posteriori in masse incrementali fino a 4 mm, in 3 colori	3 nuovi colori Il composito flowable di lunga e comprovata affidabilità clinica, in 3 masse Dentina, 8 masse Smalto e 3 colori Bleach

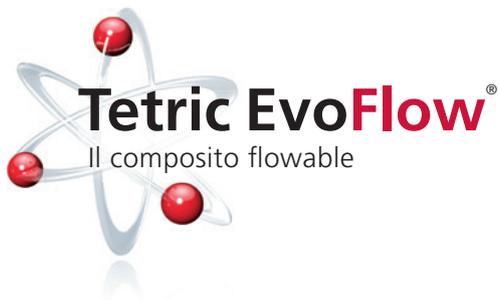

## Le nuove caratteristiche in breve

Tetric EvoFlow è disponibile in due diversi confezionamenti: in Cavifil mono-uso con puntali di applicazione extra fini e in siringa. Grazie al nuovo design ergonomico, la siringa offre un'impugnatura di massimo comfort. Per una precisa applicazione del materiale, Tetric EvoFlow si presenta oggi con le nuove cannule di applicazione in metallo da 0,9 mm. La loro forma sottile è ideale per realizzare restauri minimamente invasivi in micro-cavità difficili da raggiungere. Inoltre, grazie al sistema Luerlock le cannule si avvitano sulla siringa con semplicità e si chiudono perfettamente, garantendo un deflusso del materiale di facile e un'alta igiene.



Impugnatura ergonomica

Codifica cromatica di immediato riconoscimento

Facile montaggio, perfetta chiusura della cannula

Cavifil con puntale extrasottile


Nuova sottile cannula da 0,9 mm, per una applicazione di precisione

## La gamma cromatica di successo si arricchisce di tre nuovi colori

L'attestata gamma cromatica si arricchisce di tre nuovi colori: B1 Enamel, A2 Dentin e B2 Dentin. La massa B1 Enamel è particolarmente indicata per i denti più chiari. Grazie alla loro naturale opacità, le masse dentina possono essere utilizzate per mascherare lievi discromie nei settori posteriori.


Tetric EvoFlow può essere utilizzato in modo ottimale in combinazione con altri compositi, quali Tetric EvoCeram® e Tetric EvoCeram® Bulk Fill. Tetric EvoFlow può inoltre essere impiegato come strato iniziale nei compositi a viscosità regolare.



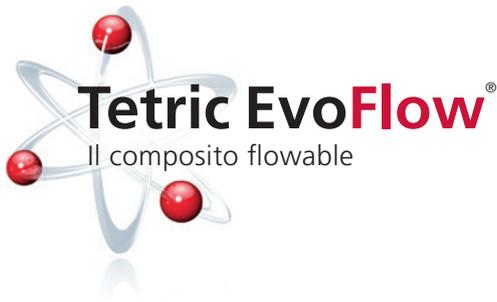

## Radiopacità più che eccellente

La buona radiopacità di un materiale da restauro è prerequisito essenziale per una diagnosi di carie secondaria affidabile. Tetric EvoFlow ha una radiopacità di 360% Al, facilitando pertanto la distinzione tra sostanza dura del dente e materiale da restauro.

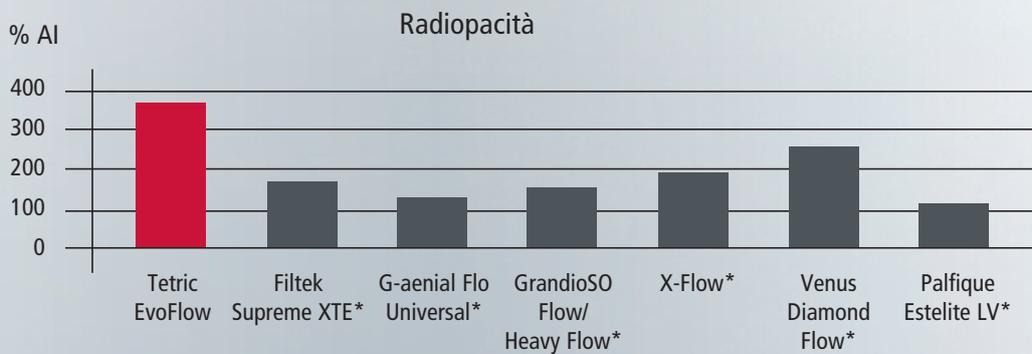

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012 (misurazione secondo ISO 4049)

\*Questi marchi non sono marchi registrati Ivoclar Vivadent AG.



## Scorrevole e stabile allo stesso tempo

Tetric EvoFlow si contraddistingue per la sua ottimale affinità di superficie e allo stesso tempo per la sua stabilità. Il prodotto pertanto scorre quando richiesto ed è stabile quando occorre. Questo comportamento è dato dal brevettato Viscosity Controller che regola lo stato flowable del materiale durante l'erogazione.

Niente spazi vuoti sotto il restauro, anche nel trattamento di cavità difficili da raggiungere.



Situazione iniziale: Tetric EvoFlow (sinistra), SDR Flow\* (centro) e Palfique Estelite LV\* (destra) sono stati applicati su barre di vetro posizionate verticalmente.



Risultato dopo cinque minuti

R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012.

\*Questo non è un marchio Ivoclar Vivadent AG.

## La consistenza ideale per tutte le indicazioni



Strato iniziale/liner in restauri in composito a viscosità regolare di Classe I a V, p.es. Tetric EvoCeram/ Tetric EvoCeram Bulk Fill



Sigillatura di fessure estese.



Microrestauri di tutti i tipi (Classe III e V).

### I vantaggi in breve

- ▶ Scorre quando richiesto, stabile quando occorre
- ▶ Consistenza ideale per tutte le indicazioni di un composito
- ▶ Il composito flowable più venduto in Europa
- ▶ L'attestata gamma cromatica ora con 3 nuovi colori

## Linea Tetric

### Tetric EvoFlow

#### Siringhe

##### Assortment 8 x 2 g

1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T  
1 x Tetric EvoFlow scala colori  
40 x 0,9 mm cannule

##### Refill da 1 x 2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B3  
T, A3.5 Dentin,  
Bleach XL, Bleach L, Bleach M  
je 5 x 0,9-mm-cannule  
**Novità:** B1, A2 Dentin, B2 Dentin,  
0,9-mm-cannule

Scala colori con tutti i 14 colori

#### Cavifils

##### Assortment da 40 x 0,2 g

5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T  
1 x Tetric EvoFlow-scala colori

##### Refill da 20 x 0,2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B3  
T, A3.5 Dentin,  
Bleach XL, Bleach L, Bleach M  
**Novità:** B1, A2 Dentin, B2 Dentin

### Tetric EvoCeram

#### Siringhe

##### Assortment 8 x 3 g

1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3  
1 x Tetric EvoCeram-scala colori

##### Refill da 3 x 3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2,  
D3, A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin,  
T, Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

##### Refill da 1 x 3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2,  
D3, A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin,  
T, Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Scala colori con tutti i 22 colori

#### Cavifils

##### Assortment da 40 x 0,2 g

5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3  
1 x Tetric EvoCeram-scala colori

##### Refill da 20 x 0,2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3,  
A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin, T,  
Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

### Tetric EvoCeram Bulk Fill

#### Siringhe

##### Refill da 1 x 3 g, 3 x 3 g

IVA, IVB, IVW

Scala colori con tutti i 3 colori

#### Cavifils

##### Refill da 20 x 0,2 g

IVA, IVB, IVW



Questo prodotto rientra nella nostra area di competenza "Competence in Composites".  
I prodotti di questo settore sono tutti ottimamente calibrati tra loro.

Ivoclar Vivadent s.r.l.  
Via Isonzo 67/69  
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. +39 051 / 591384  
Fax +39 051 / 593317  
e-mail: clinical@ivoclarvivadent.it  
[www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)

ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation