

SR Postaris® DCL



Esperienza


„La sicurezza che si acquisisce nel corso degli anni, non é compensabile da nulla. Permette un rapporto scherzoso con la vita e con tutte le sue possibilità.“

Il mio sorriso



Qualità di vita per persone esigenti

SR Postaris DCL é una linea denti posteriori per la protesi totale ed in particolare anche per la protesi parziale. Questi denti imitano i denti naturali in modo tale da ottenere un'ottimale distribuzione della forza masticatoria ed una centrica stabile.

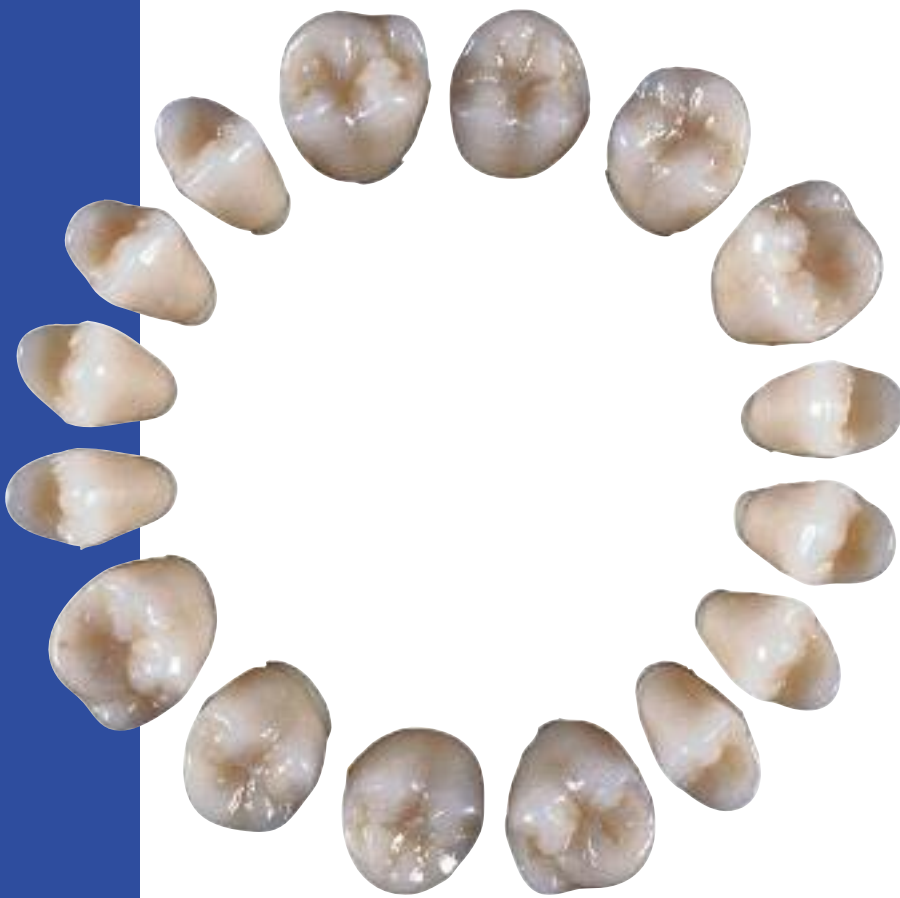

SR Postaris® DCL

Forme naturali

La linea denti SR Postaris offre un ampio spettro di forme, in cui si rispecchia la natura.

- Ampia gamma di forme
- Dimensione naturale dei denti
- Stratificazione naturale
- Particolari forme denti per la protesi parziale e totale

Estetica espressiva

- Ampia scelta di colori
- Passaggi armonici dei colletti
- Naturale tessitura
- Stratificazione naturale
- Caratterizzabili individualmente

Colori armonici

SR Postaris DCL corrispondono ai 20 colori Chromascop, la cui scala colori é uno strumento ideale per la moderna protesi combinata. Questi colori assicurano un aspetto naturale, particolarmente vivo.

I denti SR Postaris DCL sono disponibili anche nei 16 colori A-D e nei colori Bleach BL. L'ampio spettro cromatico consente una determinazione cromatica ancora più individuale e precisa.

Individualizzazioni

La gamma di colori SR Adoro® permette la creazione di caratterizzazioni sui denti.

Lo specchio

della natura

Da test clinici presso le rinomate Università di Vienna, Zurigo e Münster risultano importanti conoscenze sulla costruzione naturale dell'apparato masticatorio umano e sulle sue proprietà e funzioni. L'applicazione di questi studi clinici rispecchia una parte della natura ed è presente nella linea denti.

Affinché si riuniscano qualità di vita e restauro protesico.

SR Postaris® DCL



I denti latero-posteriori SR Postaris DCL imitano i denti naturali consentendo di ottenere un'ottimale distribuzione della forza masticatoria ed una centrica stabile.

- Ottimale distribuzione del carico masticatorio attraverso i vettori A-B-C
- Ideale statica
- Semplice e pratica trasformazione del concetto di occlusione
- Criteri di creazione clinicamente fondati



Materiale biocompatibile

La base dei denti SR Postaris è la resina Double Cross Linked. Esami tossicologici dimostrano la biocompatibilità di questa resina di elevato standard qualitativo.

- compatibile con la mucosa
- resistente all'abrasione
- resistente alla placca
- stabile nel colore
- elevata resistenza al molaggio
- perfettamente lucidabile
- ottima unione con il materiale protesico

Ampio campo d'indicazione

- protesi parziale
- protesi combinata
- protesi ibrida
- protesi totale
- protesi a supporto implantare

Esperienza & innovazione

Riuniti in

SR Postaris® DCL

Presentazione

6 forme denti posteriori superiori
6 forme denti posteriori inferiori



Valori fisici

Resistenza alla flessione (DIN 13'907)	100 MPa
Modulo di elasticità (DIN 13'907)	3'300 MPa
Durezza Vickers HV 0,5/30 (norma interna PV-324)	200 MPa
Durezza Brinell KDH 36,5/30 (DIN 53'456)	170 MPa
Legame con il polimerizzante a caldo (DIN 13'914)	130 MPa



Sistema protesico biofunzionale (BPS®)

La linea denti SR Postaris DCL è una componente importante del sistema BPS.

Alla base del sistema protesico biofunzionale vi sono ricercatori e specialisti, che hanno riunito le loro conoscenze in un oculato concetto protesico.

Il sistema BPS è un prodotto di marca, che, grazie ad una perfetta armonia fra le varie componenti, consente una lavorazione particolarmente efficace.

CE 0123

Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
0411/i

Produttore
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via Isonzo 67/69
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italia
Tel. 051 / 6113555
Fax 051 / 6113565
www.ivoclarvivadent.it
e-mail info@ivoclarvivadent.it


**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation