

NOVITÀ

IPS Ivocolor

Supercolori e glasure universali




Uno per tutti



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Un supercolore per tutte le ceramiche IPS*

individualizzare
IPS e.
Zenostar®
flessibile
ceramica
IPS Style®
IPS Empress®
IPS Empress®
IPS d.SIGN®
IPS InLine®
estetica
efficiente
pittura
supercolore
IPS InLine®
efficiente
universale
IPS e.max®
supercolore
IPS Classic®
versatile
Zenostar®

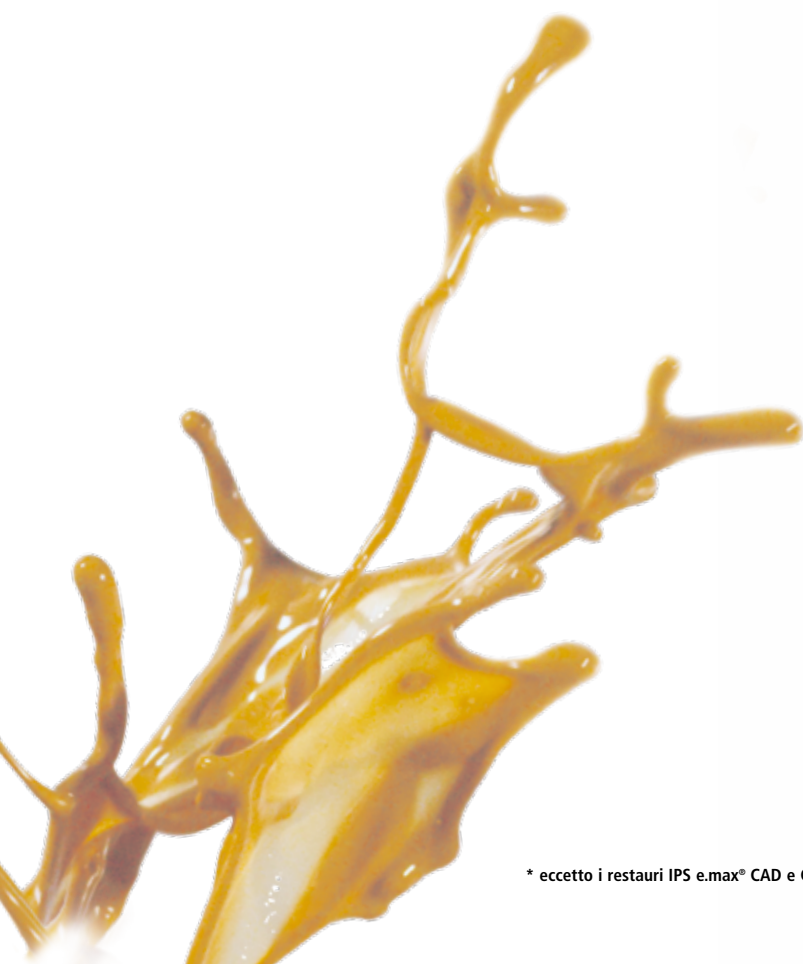

* eccetto i restauri IPS e.max® CAD e CAD-on non cristallizzati

raffinare
flessibile
max[®]
individualizzare
Essence
Glaze
color universale
estetica
IPS d.SIGN[®]
IPS Style[®]

IPS Ivocolor è l'assortimento universale di supercolori e glasura per le ceramiche per pressatura, CAD, stratificazione della Ivoclar Vivadente e per Zenostar[®] della Wieland Dental. L'odontotecnico necessita soltanto di un assortimento per la caratterizzazione individuale e la glasura dei restauri odontotecnici. In tal modo aumenta l'efficienza, aumenta la redditività in laboratorio e si ottengono restauri di elevata e costante qualità.

Quali vantaggi porta IPS Ivocolor all'odontotecnico?

- Libertà individuale nella caratterizzazione grazie a selezionate composizioni cromatiche
- Lavorazione semplificata grazie alla nuova composizione delle paste
- Elevata lucentezza già ad una temperatura di cottura di 710 °C
- Risultati di lucentezza autentici – nessuna decolorazione grigiastria o biancastra
- Indicato per ceramiche IPS ad elevata e bassa fusione



IPS Ivocolor Shade

Adattamento cromatico: rapido, semplice, bello



Con le paste IPS Ivocolor Shade arrivare al colore A-D idoneo:

- 9 colori IPS Ivocolor Shade Dentin calibrati in modo ottimale per elevata efficienza nella colorazione
- 3 IPS Ivocolor Shade Incisal per aree di smalto dall'effetto naturale
- Semplice applicazione ed applicazione omogenea grazie alla nuova struttura del gel
- Particolarmente indicato per la pittura di restauri monolitici
- Fluorescenza variabile a seconda del colore

IPS Ivocolor Shade Dentin



Shade Incisal



Gradazione cromatica con colori Shade Dentin



Shade Incisal per le aree dello smalto




IPS Ivocolor Essence

Effetti, accentuazioni, gradazioni cromatiche:
fedeli alla natura



IPS Ivocolor Essence offre libertà individuale nella caratterizzazione:

- Vetri sottilmente triturati per supercolori omogenei
- Per ogni requisito il colore adatto, grazie a 23 selezionate polveri Essence
- Versatili opzioni di lavorazione grazie al confezionamento in polvere
- Speciale Essence Fluid per una consistenza pastosa
- Fluorescenza variabile a seconda del colore

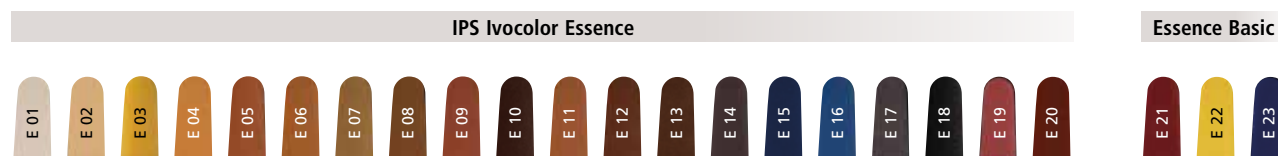

Pittura superficiale individuale



Effetti cromatici nella tecnica di stratificazione



IPS Ivocolor Glaze

Il nuovo standard nella glasura



IPS Ivocolor Glaze per risultati di cottura autentici:

- Elevata lucentezza con una sola cottura
- Lucentezza uniforme, indipendentemente dalla base ceramica sottostante (p.es. cut back)
- Nessuna decolorazione grigiasta o biancastra
- Glasure con e senza effetto di fluorescenza
- Disponibili in polvere ed in pasta

Una glasura per ceramiche ad alta e bassa fusione



Elevata lucentezza già ad una temperatura di cottura di 710 °C



IPS Ivocolor e forni per cottura Programat®.

Affinchè i risultati di cottura non rimangano affidati al caso, è disponibile la gamma di forni Programat® della Ivoclar Vivadent.

- Confortevole scelta dei programmi grazie ai programmi di cottura IPS Ivocolor già programmati
- Una temperatura di cottura per la cottura supercolori e glasura in tecnica di pittura e cut-back
- Risultati di cottura costanti grazie alla precisa guida della temperatura e distribuzione omogenea della temperatura

Il brevettato assistente del colore DSA del forno per cottura Programat® P710 della Ivoclar Vivadent consente la determinazione digitale del colore dentale su paziente tramite il confronto con il colore della scala colori selezionata con il dente naturale.



1. Prima preselezione dei tre colori dentali più simili.



2. Fotografare denti e scala colori e trasmettere i dati tramite scheda SD, WLAN oppure USB Stick all'apparecchio.

3. Selezionare analisi del colore, trasferire le foto ed avviare la determinazione cromatica digitale. Anche la luminosità e la saturazione del colore (valori L-, A- e B-) possono essere raffigurati.



Confezionamenti

IPS Ivocolor Starter Kit

5x IPS Ivocolor Shade
5x IPS Ivocolor Essence
1x IPS Ivocolor Glaze Powder
1x IPS Ivocolor Glaze Paste
1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround
1x IPS Ivocolor Essence Fluid
1x IPS Ivocolor campionario masse – Shade
1x IPS Ivocolor campionario masse – Essence

IPS Ivocolor Shade Kit

9x IPS Ivocolor Shade Dentin
3x IPS Ivocolor Shade Incisal
1x IPS Ivocolor Glaze Paste
1x IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO
1x IPS Mixing Liquid allround
1x IPS Mixing Liquid longlife
1x IPS Ivocolor campionario masse – Shade

IPS Ivocolor Essence Kit

23x IPS Ivocolor Essence
1x IPS Ivocolor Glaze Powder
1x IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO
1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround
1x IPS Ivocolor Essence Fluid
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Essence

Ricambi

IPS Ivocolor Shade

Paste pronte all'uso
in 9 colori dentina e 3 colori smalto
Confezionamento: flaconcini da 3 g

IPS Ivocolor Essence

Supercolori in polvere
in 23 diverse colorazioni
Confezionamento: flaconcini da 1,8g

IPS Ivocolor Glaze Paste/FLUO

Paste glasura
con o senza effetto fluorescenza
Confezionamento: Flaconi da 3 g e 9 g

IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO

Povere glasura
con o senza effetto fluorescenza
Confezionamento: Flaconi da 1,8g e 5g





Protesi fissa

IPS Ivocolor è un prodotto della categoria "Protesi fissa". I prodotti di questa categoria coprono l'intero iter di realizzazione di un restauro protesico fisso, dall'attuazione del provvisorio fino alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti di questa categoria sono calibrati in modo ottimale fra di loro e consentono una lavorazione ed un'applicazione di successo.



QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

IPS e.max® System

all ceramic – all you need



Una soluzione per tutte le indicazioni

- Materiali altamente resistenti e altamente estetici per la tecnologia Press e CAD/CAM
- Disilicato di litio (LS₂) ed ossido di zirconio (ZrO₂) unici nel loro genere: dalla faccetta sottile fino al ponte esteso
- Cementazione flessibile: adesiva, autoadesiva e convenzionale

Programat®

Forni di cottura e pressatura per elevate esigenze



Affermata tecnologia con molte innovazioni

- Eccellenti risultati di cottura e pressatura
- Calibrati in modo ottimale con le ceramiche Ivoclar Vivadent
- Semplice utilizzo

Desiderate saperne di più sui prodotti della categoria "Protesi fissa"? Per informazioni visitate il sito www.ivoclarvivadent.it

Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent srl
 Via Isonzo 67/69
 I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
 Tel. +39 051 611 35 55
 Fax +39 051 611 35 65
info@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.com

2015-10/it

ivoclar
vivadent[®]
 passion vision innovation