

NOVITÀ

IPS Style®

La prima metalloceramica brevettata con ossiapatite

MAKE IT YOUR!
STYLE YOUR!



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

STYLE.

Uno sguardo alle metalloceramiche

Le metalloceramiche trovano impiego 365 giorni all'anno e sono quindi una compagna quotidiana in laboratorio. L'utilizzo è ormai ovvio, i risultati sono prevedibili. La sua affidabilità clinica convince. In tal modo danno il loro determinante contributo al successo di un laboratorio. La metalloceramica è lo „stato dell'arte“.

Con 40 anni di esperienza nel campo della metalloceramica Ivoclar Vivadent si allaccia alle conoscenze acquisite e percorre nuove strade con una metalloceramica, che finora non c'era.

Make it your Style!



Quali sono le novità di IPS Style®?


IPS Style® è la prima metalloceramica brevettata con cristalli di ossiapatite. In combinazione con cristalli di leucite e fluoroapatite ed attraverso calibrate fasi di vetro, la lavorabilità e le caratteristiche ottiche di questa ceramica di vetri misti a bassa fusione, sono uniche nel loro genere.

Il sistema ceramico IPS Style è indicato per il classico campo CET e comprende componenti per la classica tecnica di stratificazione mono e pluristrato. IPS Style non è solo rapida e semplice, ma anche altamente estetica: la ceramica è coordinata con l'assortimento universale di supercolori e glasura IPS Ivocolor.


I cristalli noti nella ceramica dentale:



Leucite cristallina
Espansione controllata
e resistenza
(ingrandimento x8.200)

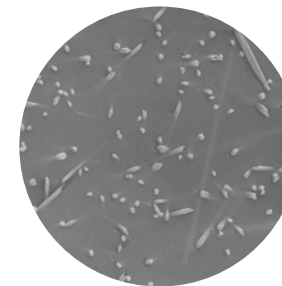

Fluoroapatite ad aghi sottili
Luminosità di base naturale
Vitalità ed espressività
(ingrandimento 10'000)

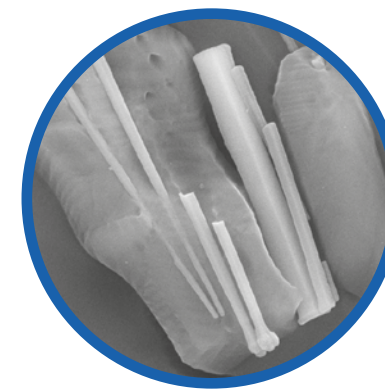

Ossiapatite aghiforme
Guida mirata di traslucenza
rispettiv. opacità
(ingrandimento 10'000)

NOVITÀ

Cosa significa?

La minima contrazione fa risparmiare tempo. **Make it fast.**

Il semplice utilizzo offre sicurezza. **Make it easy.**

L'ossiapatite controlla la traslucenza e l'effetto di profondità. **Make it natural.**

Qual'è la particolarità?

La miscela è realizzata su misura.

IPS Style unisce in una ricetta tre importanti cristalli: Leucite, fluoroapatite ed ossiapatite.

MAKE IT FAST.

IPS Style® è veloce...

Comportamento di contrazione ottimizzato

La contrazione odontotecnica ottimizzata di IPS Style porta in breve tempo al risultato desiderato. Già dopo la prima cottura corrisponde quasi al contorno finale.



Classica metaloceramica



IPS Style®

Comportamento di contrazione della ceramica ed umettamento dell'Opaquer a confronto: In condizioni standardizzate di test* IPS Style® presenta un risultato di cottura visibilmente migliore di una classica metaloceramica.

*Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015

Elevata stabilità dei bordi

La forma modellata, dettagli elaborati e la morfologia rimangono inalterate durante le cotture. Questo riduce il numero di cotture e fa risparmiare tempo prezioso.



” *IPS Style è un materiale molto estetico con un particolare effetto di luminosità. Apprezzo anche la semplice modellabilità del materiale e la minima contrazione. In tal modo i restauri possono essere realizzati in modo più semplice e privo di stress. Questo è un enorme vantaggio!* ”



Odt. Gérald Ubassy,
Laboratoire dentaire et Centre de
Formation International, Francia

... e ancora più veloce

Stratificazione con una sola massa

Già le masse da stratificazione IPS Style Ceram per la classica stratificazione multistrato facilitano notevolmente la quotidianità. La massa da stratificazione IPS Style Ceram One provvede ad un'efficienza ancora maggiore. Con questa, si possono realizzare restauri interamente anatomici in metalloceramica in modo ancora più semplice ed estetico.

Le masse dentina e smalto di IPS Style Ceram One sono combinate in modo ideale fra di loro, per una colorazione e traslucenza naturali.

Ogni minuto conta

L'IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 possiede la stessa architettura chimica delle masse da stratificazione IPS Style.

La componente di cristalli di ossiapatite è particolarmente elevata nell'opaco: anche in caso di spessori molto sottili, si ottiene un elevato potere coprente, sia in caso di applicazione classica che in caso di applicazione in tecnica spray-on, per ottenere un elevato potere luminoso dal profondo.



Odt. Milos Miladinov, Romania

“ Mi convincono la forza e l'espressività della ceramica. IPS Style vive del legame dell'Opaquer, che agisce dal profondo, con i molti diversi materiali da stratificazione, che danno una nuova definizione di estetica. ”



Mastro Odt.
Christoph Andres,
Zahntechnik Andres,
Svizzera

MAKE IT EASY.

IPS Style® è semplice...

**Eccellente resistenza,
lavorabilità intuitiva**

IPS Style si lavora come ogni convenzionale metalloceramica.

La differenza sostanziale: un'eccellente resistenza e semplice modellabilità del materiale. Le masse da stratificazione rimangono straordinariamente ferme.

IPS Style favorisce i nuovi utilizzatori e gli utilizzatori esperti allo stesso tempo nel loro stile di lavorazione: per ottenere risultati convincenti.



... e facilita la quotidianità

Aperta per tutte le strutture

IPS Style è indicata per tutte le strutture nel campo CET indicato, indipendentemente dal procedimento con cui sono state realizzate. Sia che si tratti di metallo nobile o vile, digitale o analogico, fusione o fresatura. Su leghe vili, p.es. Colado® CAD CoCr4 oppure Colado® CC, IPS Style può essere utilizzata per il rivestimento estetico addirittura senza Bonder, per una funzionalità illimitata in poche fasi di lavoro



I dischi Colado® CAD CoCr4 possono p.es. essere fresati con la fresatrice PrograMill PM7 e quindi essere rivestiti esteticamente con IPS Style®.



Mastro Odt. Benjamin Votteler,
Dentaltechnik Votteler,
Germania

” Stratifico la ceramica in consistenza piuttosto umida. IPS Style anche se miscelata piuttosto fluida si lascia applicare bene e rimane poi stabile dove viene posizionata. Questo finora non mi era successo quasi mai con altre ceramiche. ”

Schema di stratificazione calibrato

Lo schema di stratificazione uniforme della metalloceramica IPS Style e della ceramica integrale IPS e.max® consente di elaborare casi clinici complessi con diversi materiali in modo ideale per un aspetto armonico globale.



Mastro Odt. Benjamin Votteler; Dr. Feraydoon Sharghi,
Germania



Mastro Odt. Oliver Morhofer; Dr. Baris Yanik, Germania



Mastro Odt.
Oliver Morhofer,
High-Tech-Dental,
Germania

” IPS Style è una metalloceramica, che si può misurare con la ceramica integrale IPS e.max. Le possibilità di combinazione di diversi materiali, anche in area altamente estetica mi ha affascinato e convinto. ”

MAKE IT NATURAL.

IPS Style® è estetica...

Illimitati giochi di luce

In tutte le componenti colorate di IPS Style, dall'Opaquer fino allo smalto sono contenuti cristalli di ossiapatite. L'eccellente luminosità di base di IPS Style porta intraoralmente a risultati di effetto naturale. Indipendentemente dal numero di cotture, i restauri realizzati convincono con elevata stabilità cromatica. Con l'ampia scelta di masse a disposizione, l'individualità ottiene lo spazio che le compete.




H. & D. Crescenzo; Dr. Michel Becker, Francia



... e conferisce un estetico effetto di profondità

NOVITÀ

Che effetto hanno i cristalli di ossiapatite?

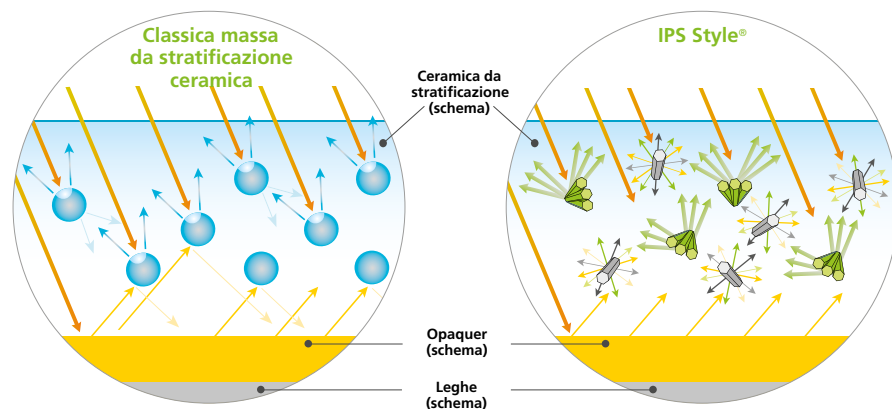


Opacizzazione convenzionale, causata da un'elevata quota di pigmenti opacizzanti: La luce incidente viene riflessa superficialmente ed in parte assorbita nella massa da stratificazione. Il materiale ha un aspetto opaco. Il colore dell'Opaquer non può agire dal profondo.

Torbidità causata da cristalli aghiformi: La luce incidente viene dispersa e riflessa in modo diffuso. L'elevato potere di rifrazione dei cristalli determina l'estetica ed include anche il colore dell'Opaquer nella gestione del colore e della luce del restauro.

Materiale con elevata luminosità

Cristalli di fluoroapatite in forma di sottili aghi, grazie alla dispersione ed al riflesso diffuso della luce, portano ad un'elevata luminosità. Cristalli di ossiapatite aghiforme possiedono un elevato potere rifrangente, che produce effetto di profondità. Il contenuto di cristalli di ossiapatite varia dall'Opaquer fino alle masse smalto, per un mirato controllo della traslucenza.

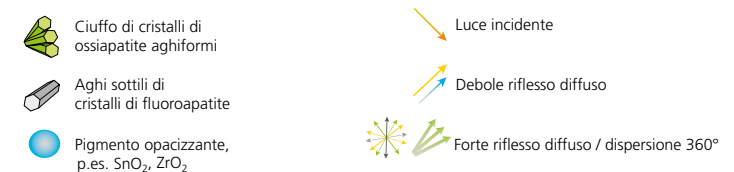

“ *Lavorare con IPS Style è stato un piacere fin dall'inizio. I restauri sono molto chiari e presentano un'ottima naturalezza. Per noi IPS Style come metaloceramica è il completamento della ceramica integrale IPS e.max. Con IPS Style c'è molto da scoprire – la ceramica consente, come anche IPS e.max, molte tecniche.* ”



Hélène & Didier Crescenzo,
Laboratory Esthetic Oral,
Francia

MAKE IT UNIQUE.

IPS Style® è perfetta per il laboratorio...

NOVITÀ

IPS Ivocolor

L'universale sistema supercolori e glasura IPS Ivocolor è una componente del sistema ceramico IPS Style ed è indicato per la caratterizzazione individuale. È calibrato con tutte* le ceramiche Press, CAD e da stratificazione della Ivoclar Vivadent, fra l'altro anche con la ceramica integrale IPS e.max®. Un sistema cromatico per quasi tutte le ceramiche.



Digital Shade Assistant (DSA)

Design esclusivo unitamente ad intelligente tecnica: Il brevettato assistente cromatico DSA del forno per cottura ceramica High-Tech Programat® P710 consente il rilevamento digitale del colore dentale del paziente attraverso un confronto del colore della scala colori scelta con il dente naturale.



* eccetto su restauri IPS e.max® CAD e CAD-on non cristallizzati

... e provvede anche nello studio alla perfezione

L'adatta cementazione

I restauri rivestiti esteticamente con IPS Style, a scelta si possono cementare con il cemento composito universale Multilink® Automix, il cemento composito autoadesivo SpeedCEM® Plus oppure con il cemento vetroionomero Vivaglass® CEM.

Per la cementazione di faccette in IPS Style è particolarmente indicato Variolink® Esthetic, il cemento composito estetico per la cementazione definitiva di restauri in ceramica di elevata qualità.



Cura e protezione

I restauri rivestiti esteticamente con IPS Style, devono essere curati professionalmente e nel tempo così come anche la gengiva e le mucose. La lacca protettiva Cervitec® Plus contiene le componenti antimicrobiche clorexidina e timolo. Questi proteggono la superficie dentale riducendo l'attività batterica.





Protesi fissa

IPS Style® è un prodotto della categoria "Protesi fissa". I prodotti di questa categoria coprono l'intero iter di realizzazione di un restauro protesico fisso, dall'attuazione del provvisorio fino alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti sono calibrati in modo ottimale fra di loro e consentono una lavorazione ed un'applicazione di successo.



QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

Leghe

Varietà di leghe che unisce



Competenza, qualità, fiducia

- Vasta e moderna disponibilità di leghe
- Perfettamente calibrate con ceramiche e compositi da rivestimento estetico
- Oltre 100 anni di esperienza nel campo delle leghe dentali

IPS Ivocolor

Supercolori e glasure universali



Una per tutte

- Versatile – compatibile con tutte le ceramiche IPS* e Zenostar® (ossido di zirconio)
- Flessibile – dalla pittura e glasura fino alla miscelazione nelle masse ceramiche
- Estetico – colori di effetto naturale

* eccetto i restauri IPS e.max® CAD e CAD-on non cristallizzati

Desidera saperne di più sui prodotti della categoria "Protesi fissa"?
Per informazioni visiti il sito www.ivoclarvivadent.it

Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG
 Benderstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent srl
 Via del Lavoro, 47
 I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
 Tel. +39 051 611 35 55
 Fax +39 051 611 35 65
info@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.com

Le descrizioni ed i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.
 Stampato in Italia
 © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
 IT/2018-05-22

ivoclar
vivadent
 passion vision innovation