

Vivaglass® CEM PL

CEMENTO VETROIONOMERICO AUTOINDURENTE AD ELEVATA TRASPARENZA



ivoclar
vivadent®
clinical

PRATICO e CONVENIENTE

Vivaglass CEM PL* è un cemento vetroionomerico autoindurente che nasce dalla combinazione sapientemente calibrata di liquido e polvere.

Le eccezionali proprietà umettanti ed il dosaggio di miscelazione semplice e chiaro – 1 goccia di liquido + 1 misurino di polvere per 1 corona – consentono di ottenere un cemento pronto all'uso in pochi secondi.

*PL = Polvere/Liquido



CONTAGOCCE BREVETTATO

Dispensare il liquido nell'esatto dosaggio è più facile grazie all'innovativo tubetto brevettato con contagocce incorporato. La pratica confezione assicura un dosaggio sempre costante e riproducibile garantendo risultati di elevata qualità.

CARATTERISTICHE


- ✦ Elevata trasparenza
- ✦ Buoni valori d'adesione su dentina
- ✦ Facile da miscelare / Eccellenti proprietà umettanti
- ✦ Bassa solubilità
- ✦ Costante rilascio di fluoro
- ✦ Radiopaco
- ✦ Ottime proprietà di scorrimento
- ✦ Ridotto spessore del film
- ✦ Colore universale (bianco-giallo)



INDICAZIONI

Vivaglass CEM PL è indicato per la cementazione definitiva di:


- ✦ inlay, onlay, corone, ponti fusi in metallo, in metalloceramica o in metalloresina con sufficiente ritenzione meccanica
- ✦ corone in ceramica integrale e ponti in ceramica ad elevata resistenza (IPS Empress 2, ceramiche all'ossido d'alluminio, ceramiche all'ossido di zirconio)
- ✦ perni radicolari in metallo e ricostruzioni di moncone su perni indiretti in metallo
- ✦ bande ortodontiche
- ✦ corone preconfezionate in acciaio

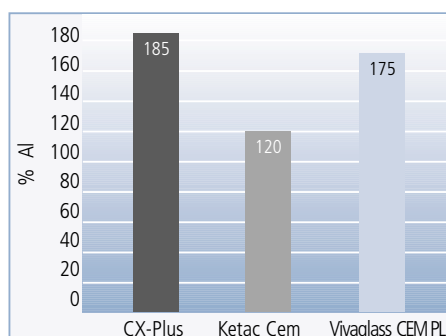

Radiopacità

Nel grafico, Vivaglass CEM PL presenta valori di radiopacità paragonabili ai prodotti concorrenti, quindi è facilmente leggibile in radiografia.

Studio In-house R&D Ivoclar Vivadent, Schaan
CX-Plus è marchio registrato Shofu,
Ketac Cem è marchio registrato 3M ESPE

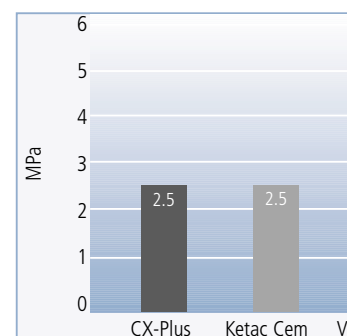

ESTETICO

Oltre alla versione a miscelazione manuale polvere-liquido (PL) nell'innovativa confezione con tubetto brevettato per liquido, Vivaglass CEM è disponibile anche nella versione IC (Injection Capsule) in capsule predosate.



Le capsule predosate Ivoclar Vivadent sono compatibili con tutti i miscelatori e applicatori oggi sul mercato.

APPLICAZIONE

Miscelare polvere e liquido secondo le proporzioni 1:1 e applicare il cemento. Fatto!

- ✦ Non richiede mordenzatura, adesivo, diga di gomma
- ✦ Autoindurente, a polimerizzazione chimica
- ✦ Elevati valori d'adesione su metallo, ceramica e dentina

INDICAZIONI

- ✦ Ceramica integrale rinforzata quali IPS Empress, ceramiche all'ossido di zirconio, ceramiche all'ossido d'alluminio.
- ✦ Metalloceramiche quali IPS Classic e IPS d.SIGN.



TRASPARENZA

L'elevata trasparenza di Vivaglass CEM PL rispetto ai prodotti concorrenti, garantisce la massima estetica nella cementazione di restauri in ceramica integrale o di spalle in ceramica esposte.

Vivaglass CEM PL

Ketac-Cem

CX-Plus




CX-Plus è marchio registrato Shofu, Ketac Cem è marchio registrato 3M ESPE



Adesione su dentina

Nei test di resistenza al taglio, Vivaglass CEM PL presenta valori d'adesione su dentina più alti rispetto ai prodotti concorrenti.

Studio In-house R&D Ivoclar Vivadent, Schaan
CX-Plus è marchio registrato Shofu, Ketac Cem è marchio registrato 3M ESPE

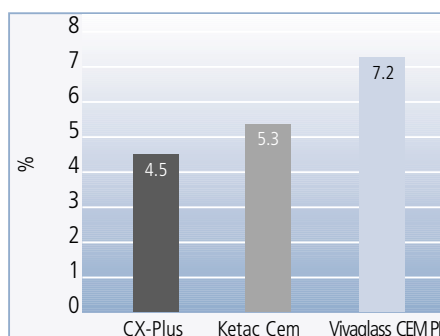

Trasparenza

Grazie all'elevata trasparenza e alla colorazione chiara, il prodotto è particolarmente indicato per cementazioni d'elevata qualità estetica.

Studio In-house R&D Ivoclar Vivadent, Schaan
CX-Plus è marchio registrato Shofu, Ketac Cem è marchio registrato 3M ESPE

CONFEZIONI INNOVATIVE

CONFEZIONAMENTI

CAPSULE PREDOSATE

Refill

25 Capsule predosate
Vivaglass CEM IC/0,4g
Colore Universale



Applicatore per capsule



VERSIONE PL a MISCELAZIONE MANUALE

Assortiment

- 1 tubetto Vivaglass CEM PL
Liquido, 10 ml
- 1 flacone Vivaglass CEM PL
Polvere, 30 g
- 1 misurino
- 1 blocchetto impasto



Refill Liquido

- 1 tubetto Vivaglass CEM PL
Liquido, 10 ml



Refill Polvere


- 1 flacone Vivaglass CEM PL
Polvere, 30g



Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti e non sono vincolanti.
Stampato in Austria © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
575074/0403/7/ii/VVA

Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via dell'Industria 16
I-39025 Naturno (BZ)
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent s.r.l.
Divisione Clinical
Via del Lavoro 30/4
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 / 591384
Fax 051 / 593317
e-mail: clinical@ivoclarvivadent.it

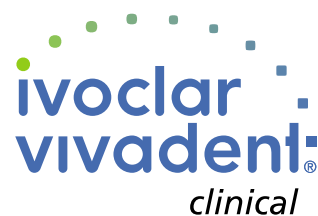
ivoclar
vivadent®
clinical