

# Excite® F

ADESIVO TOTAL ETCH  
FOTOINDURENTE



# Excite® F DSC

ADESIVO TOTAL ETCH  
AD INDURIMENTO DUALE



L'adesione possibile ...  
con e senza luce!

# ExcITE® F

Un legame adesivo forte è una questione di chimica

## CONVENIENTE ED EFFICIENTE

ExcITE® F è un adesivo fotoindurente, monocomponente, a rilascio di fluoruro, che si usa in combinazione con la tecnica Total Etch. Si utilizza nel posizionamento di restauri diretti (compositi, compomeri), come pure nella cementazione adesiva di restauri indiretti (ceramica integrale, compositi) che richiedono una fotopolimerizzazione.

ExcITE F è disponibile nell'originale confezionamento a forma di penna VivaPen® ed in flaconi.



Per gentile concessione di Dr. A. Peschke,  
Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein

### Vantaggi di VivaPen

- Applicazione diretta semplice e veloce nella bocca del paziente
- Nessuno spreco di materiale grazie al dosaggio preciso ed alla speciale cannula VivaPen „snap-on“
- Buona accessibilità a tutte le cavità grazie alla cannula fine
- Indicatore integrato del livello di materiale residuo
- 2 ml di VivaPen sono sufficienti per circa 120 applicazioni

Applicazione precisa e pennellatura delicata

Dispensazione precisa ed economica



### Competence in Composites



OptraDam® Plus




Total Etch



ExcITE® F

## LEGAME ADESIVO FORTE

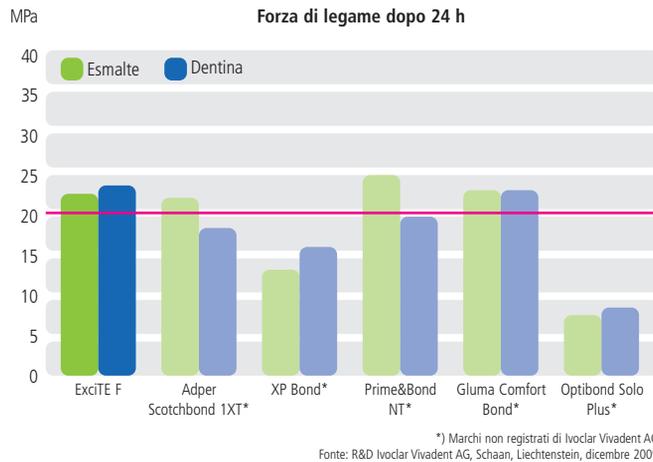

### Legame adesivo forte su smalto e dentina

Un singolo strato di ExcITE F è sufficiente per stabilire un legame duraturo con i tessuti del dente.

### Composizione chimica priva di acetone

ExcITE F contiene etanolo come solvente, che permette di conservare l'adesivo per periodi di tempo prolungati senza influire sulla sua qualità o sui risultati di adesione.

### Sensibilità postoperatoria ridotta

Il rilascio di fluoruro durante i primi giorni dopo il restauro è stato concepito per contribuire a prevenire le sensibilità postoperatorie.

ExcITE F contiene riempitivi finissimi (nanoriempitivi). Pertanto, è facile da distribuire sulla superficie da trattare in uno strato omogeneo. Inoltre, durante l'applicazione sulla superficie, si forma uno strato lucido che consente di verificare l'omogeneità di distribuzione su dentina e smalto.

### Sistema versatile

A condizione che venga precedentemente fotopolimerizzato, ExcITE F può essere utilizzato anche per posizionare restauri indiretti. Il ridotto spessore della pellicola di adesivo, lascia ampio spazio per il cemento utilizzato nelle procedure di cementazione.



Controllo della quantità residua di materiale



IPS Empress® Direct



Astropol® und Astrobrush®



Tetric EvoFlow®

bluephase®

# Excite® F DSC

## Adesivo monocomponente ad indurimento duale

### TECNOLOGICA INNOVATIVA CON APPLICATORE

**Excite® F DSC – Dual Cure Single Component** – è un adesivo smalto-dentinale ad indurimento duale e rilascio di fluoruro, che si usa in combinazione con la tecnica Total Etch. Excite F è stato inoltre concepito per i casi clinici nei quali vengono impiegati materiali non fotoindurenti o compositi ad indurimento chimico.

Excite F DSC comprende uno speciale applicatore brevettato, rivestito con gli attivatori necessari per l'azione d'indurimento duale. Una volta immerso l'applicatore nella soluzione adesiva, gli attivatori si miscelano con l'adesivo conferendogli la proprietà d'indurimento duale.

Come Excite F, Excite F DSC raggiunge risultati di adesione eccellenti e, grazie alla sua composizione chimica priva di acetone, presenta un'ottima stabilità di conservazione.

#### Applicatore rivestito con cristalli attivatori al microscopio elettronico



#### Impiego clinico

Per gentile concessione di R Watzke,  
Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein



1. Mordenzare la dentina del canale radicolare e la restante superficie esposta del dente con acido fosforico.



2. Sciacquare lo spazio del moncone.



3. Successivamente, asciugare ad esempio con punte di carta.

## APPLICATIONE SEMPLICE

L'applicazione di ExcITE F DSC è tanto semplice ed efficiente quanto quella dei materiali utilizzati in tecniche restaurative dirette. Le cartucce monodose erogano adesivo fresco per ogni applicazione, senza il rischio di essiccazione dell'adesivo. Non è necessario preindurire ExcITE F DSC come nel caso di molti altri sistemi adesivi. In questo modo, le misure inerenti le varie tipologie di restauro non vengono compromesse.


### Indicazioni

- Cementazione adesiva di restauri indiretti realizzati in ceramica o in materiale composito con sistemi di cementazione ad indurimento duale o autoindurenti (ad es. Variolink® II)
- Cementazione adesiva di monconi radicolari (ad es. FRC Postec® Plus)
- Restauri diretti e ricostruzioni di perni con compositi ad indurimento duale e autoindurenti (ad es. MultiCore®)
- Restauri diretti/cementazione con compositi fotoindurenti (ad es. Tetric EvoCeram®, Variolink II)

### Applicatori in due diverse forme/dimensioni:



Regular (azzurro) per preparazioni normali e Small/Endo (blu scuro) per microcavità e canali radicolari

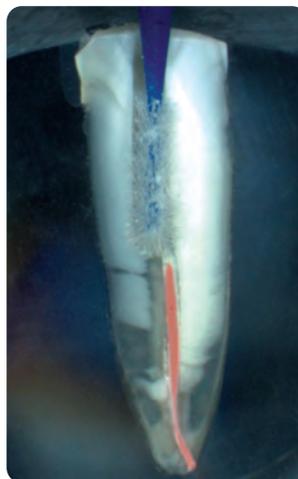

Applicazione semplice di ExcITE F DSC nel canale radicolare con un applicatore Endo



4. Applicare ExcITE F DSC per 10 s con un applicatore Endo ed asciugare.



5. Cementare il perno e ricostruire il moncone con MultiCore Flow.



6. Ricostruzione del moncone ultimata

# ExcITE® F & ExcITE® F DSC

## Un team imbattibile

### Vantaggi di ExcITE F

- Valori di legame su smalto e dentina elevati
- Qualità consistente grazie alla composizione chimica priva di acetone
- Sensibilità postoperatoria ridotta grazie alla sigillatura efficace della superficie dentinale
- Disponibile nel confezionamento a forma di penna VivaPen ed in flaconi

### Forme di confezionamento\*

#### ExcITE F

##### VivaPen

<b>Intro Pack</b>	627177AN
ExcITE F da 2 ml	
100 cannule a incastro VivaPen	
20 guaine protettive VivaPen	
Total Etch da 2 g	
10 c annule di applicazione Total Etch	

<b>Refill/1</b>	613724AN
ExcITE F da 2 ml	
100 cannule a incastro VivaPen	
20 guaine protettive VivaPen	

<b>Refill/3</b>	626969AN
3 ExcITE F da 2 ml	
300 cannule a incastro VivaPen	
20 guaine protettive VivaPen	

<b>Accessoari VivaPen</b>	
Cannule a incastro Refill VivaPen/100	627178
Guaine protettive Refill VivaPen/300	627492

### Vantaggi di ExcITE F DSC

- Sistema monofase facile da usare grazie all'applicatore brevettato rivestito con attivatori
- Basato sulla tecnologia ExcITE F e quindi con proprietà fisiche comprovate
- Non necessita di una pre-fotopolimerizzazione
- Formulazione igienica monodose

##### Flacone

<b>Refill</b>	630375AN
ExcITE F da 5 g	

<b>Refill</b>	630376AN
2 ExcITE F da 5 g	

<b>Accessori per flaconi</b>	
Applicatori Refill Regular/ 50	631699

#### ExcITE F DSC

##### Soft Touch Single Dose

<b>Refill Regular</b>	630378AN
50 ExcITE F DSC da 0,1 g	

<b>Refill Small/Endo</b>	630380AN
50 ExcITE F DSC da 0,1 g	

\* La disponibilità delle diverse forme di confezionamento varia di paese in paese.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, si prega di contattare direttamente Ivoclar Vivadent o di visitare il nostro sito web.



ExcITE F rientra nella nostra area di competenza „Competence in Composites“. I prodotti di quest'area sono coordinati tra di loro in maniera ottimale.



ExcITE F DSC rientra nella nostra area di competenza „Competence in All-Ceramics“. I prodotti di quest'area sono coordinati tra di loro in maniera ottimale.

Questi materiali sono stati messi a punto esclusivamente per l'impiego in odontoiatria. La lavorazione deve essere eseguita rigorosamente in conformità alle istruzioni per l'uso. Descrizione e dati non costituiscono alcuna garanzia degli attributi e non sono vincolanti.  
Stampato in Italia  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
01.04.2010/it

Distribuito da:  
**Ivoclar Vivadent Divisione Clinical**  
Via Isonzo 67/69  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. +39 051 / 591384  
Fax +39 051 / 593317  
e-mail: clinical@ivoclarvivadent.it

**Ivoclar Vivadent s.r.l. & C. sas**  
Via Gustav Flora, 32  
39025 Naturno (BZ)  
Tel. +39 0473 / 670111  
Fax +39 0473 / 667780  
www.ivoclarvivadent.it

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation